



Нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2

Для количественного определения
общего количества антител S1 к вирусу SARS-CoV-2

Нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2


Тест предоставляет информацию об иммунном статусе пациентов, которые заразились COVID-19 или были вакцинированы.

Данный тест выполняется на анализаторе CHORUS.

Конкурентный метод

Твердая фаза сенсibilизируется вирусом SARS-CoV-2, культивированным, инактивированным и очищенным по запатентованному методу Diesse в ее лабораториях BSL3.

Моноклональный трейсер представляет собой терапевтическое антитело человека, направленное против RBD субъединицы S1 шиповидного белка вируса SARS-CoV-2. Он проявляет сильную нейтрализующую активность против вируса и его разновидностей (английского, Южно-Африканского и Бразильского).

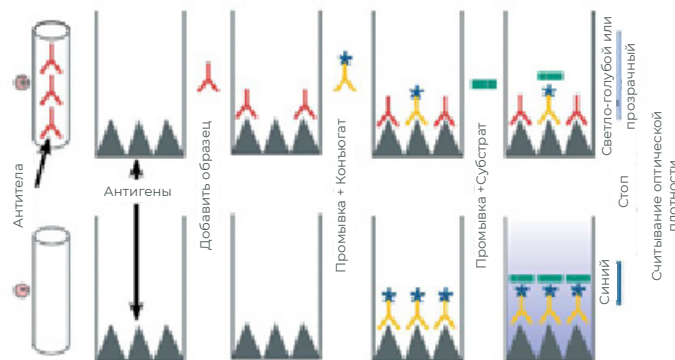

Основные характеристики

- Готовые к использованию диагностические устройства для одного теста
- Удобная упаковка: 6 приборов в 6 герметичных алюминиевых трехслойных пакетах
- Гибкость и простота в проведении тестов
- Гибкость и простота в проведении тестов
- Полная прослеживаемость результатов благодаря технологии Identisystem

Количественное определение общего количества антител S1 к вирусу SARS-CoV-2 (IgG, IgM и IgA)

Результаты выражены в BAU (биоэквивалентная аллергенная единица)/мл

Соответствуют первому Международному стандарту ВОЗ

Широкий диапазон анализа: 20-1500 BAU (биоэквивалентная аллергенная единица)/мл

Чувствительность: 99,6% CI95%: 97,7 - 99,9
Специфичность: 99,8% CI95%: 99,2 - 99,9

ЗАКАЗАТЬ НАБОР:

CHORUS Нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2

36 тестов

81408

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.westmedica.eu

Официальный дистрибьютер