

# CUBE 30 TOUCH

30 результатов менее чем за 25 минут  
по методу Вестергрена



АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СОЭ

**DIESSE**

## Удобный и быстрый анализатор СОЭ



- 30 результатов за 25 минут
- Анализ СОЭ в первичных пробирках с EDTA
- Непрерывная загрузка образцов
- Встроенный сканер штрих-кода
- Тщательное перемешивание образцов
- 10-дюймовый цветной сенсорный экран
- Встроенный принтер
- Тестирование при комнатной температуре
- Отсутствие аспирации пробы
- Отсутствие реагентов и отходов

## Используются первичные пробирки





Анализ проводится на образцах крови, собранных в тех же пробирках с K2/K3 EDTA, которые используются для общего анализа крови.

Анализ СОЭ может быть проведен на микрообъемах крови (0,5 мл) с автоматическим определением педиатрических образцов. Не требуется специальная цитратная пробирка.

## Инновационный интерфейс

## Контроль качества

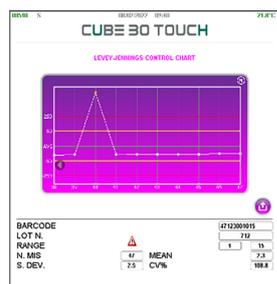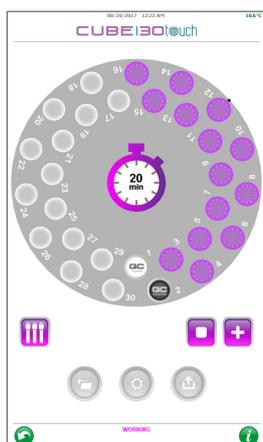

POSITION 1 [NORMAL]

NAME

BARCODE

LOT N.

EXP. DATE

RANGE MIN  MAX

POSITION 1 [ABNORMAL]

NAME

BARCODE

LOT N.

EXP. DATE

RANGE MIN  MAX

- Интуитивно понятный интерфейс
- Графическое отображение физического заполнения пробирок
- Визуализация оседания в реальном времени для сравнения с образцом

- Внутренний контроль качества с помощью графиков Леви-Дженнинга и правил Вестгарда
- Архив пациентов до 5000 результатов

## Контрольные материалы



Набор контрольных материалов ESR Control CUBE от Diesse обеспечивает точность и качество проводимых исследований.

Совместим со всеми анализаторами линейки VES-MATIC и CUBE.

# Технические характеристики

Метод измерения	По Вестергрону
Расчетный метод	По Панченкову
Время измерения	20 мин
Производительность	До 60 тестов в час
Память	10 000 измерений
Объем пробы	1,5–4 мл
Используемые пробирки	13 x 75 мм; цвет крышки — фиолетовый; с антикоагулянтом EDTA
Диапазон измерения	От 0 до > 140 мм/час
Корректировка результатов по температуре	Автоматическая корректировка результатов по номограмме Менли (для температуры 18 °С)
Дисплей	Цветной сенсорный ЖК, 10-дюймов
Перемешивание проб	Автоматическое
Количество образцов	До 30
Принтер	Термобумага — 57 мм
Идентификация проб	Встроенный сканер штрих-кодов

# Прибор и принадлежности

## Стандартная комплектация

Прибор CUBE 30 Touch  
Кабель питания  
Предохранители  
USB-кабель  
Стилюс для сенсорного экрана  
Держатель для пробирок  
Термобумага  
Руководство пользователя

## Расходные материалы

Транспондер NEXT 500  
Транспондер NEXT 1k  
Транспондер NEXT 5k  
Транспондер NEXT 10k

## Контрольные материалы

ESR CONTROL CUBE (2N+2ABN)  
ESR CONTROL CUBE (1N+1ABN)

# Анализаторы серии CUBE и VES-MATIC



MINI-CUBE



CUBE 30 Touch



VES-MATIC 5

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH  
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1  
2351 Wiener Neudorf, Austria  
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464  
vienna@westmedica.com, www.diesse-it.eu

Официальный дистрибьютер