

MINI-CUBE

Доступное решение для анализа СОЭ
в медицинской лаборатории!



DIESSE

Компактный, быстрый и удобный в использовании



- Непрерывная загрузка образцов
- Штрих-код сканирование для идентификации пациента
- Однонаправленное и двунаправленное соединение с LIS
- USB-порт и Bluetooth-соединение с принтером
- Анализ при комнатной температуре
- Нет затрат на утилизацию расходных материалов
- Отсутствие жидких отходов

Используются первичные пробирки




Анализ проводится на образцах крови, собранных в тех же пробирках с K2/K3 EDTA, которые используются для общего анализа крови.

Анализ СОЭ может быть проведен на микрообъемах крови (0,5 мл) с автоматическим определением педиатрических образцов. Не требуется специальная цитратная пробирка.

Инновационный интерфейс



Контроль качества

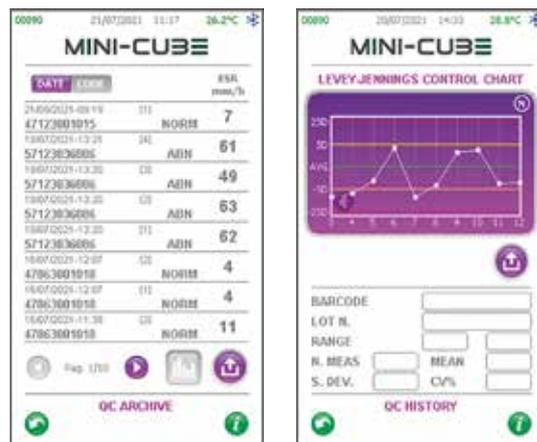

- Интуитивно понятный интерфейс
- Графическое отображение фактического заполнения пробирок
- Визуализация оседания в реальном времени для сравнения с образцом

- Внутренний контроль качества с помощью графиков Леви-Дженнинга и правил Вестгарда
- Архив пациентов до 5000 тестов

Контрольные материалы



Набор контрольных материалов ESR Control CUBE от Diesse обеспечивает точность и качество проводимых исследований.

Совместимы со всеми анализаторами линейки VES-MATIC и CUBE.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Метод измерения | По Вестергрону |
| Расчетный метод | По Панченкову |
| Время измерения | Гематологические пробирки — 20 мин Педиатрические пробирки — 20 мин |
| Производительность | Гематологические пробирки — до 12 тестов в час Педиатрические пробирки — до 12 тестов в час |
| Объем пробы | Гематологические пробирки: от 1,5 мл до 4 мл Педиатрические пробирки: 500 ± 10 мкл |
| Диапазон измерения | 1-139 мм/ч |
| Корректировка результатов по температуре | Автоматическая корректировка результатов по номограмме Менли (для температуры 18 °С) |
| Принтер | Bluetooth-принтер для MINI-CUBE, термобумага Н = 58 ± 1 мм, Ø 30 ± 1 мм |

Прибор и принадлежности

Стандартная комплектация

Прибор MINI-CUBE
Блок питания
Кабель питания
USB-кабель
Стилус для сенсорного экрана
Адаптер питания для Bluetooth-принтера
Руководство пользователя
CD-диск
USB-накопитель

Расходные материалы

Транспондер NEXT 500
Транспондер NEXT 1K

Контрольные материалы

ESR CONTROL CUBE (2N+2ABN)
ESR CONTROL CUBE (1N+1ABN)

Дополнительно

Внешний сканер штрих-кодов
Bluetooth-принтер
Термобумага для принтера


Анализаторы серии CUBE и VES-MATIC



MINI-CUBE



CUBE 30 Touch

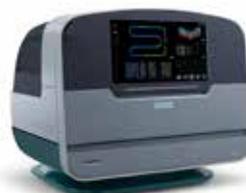

VES-MATIC 5

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.diesse-it.eu

Официальный дистрибьютер